



ANNEXE A

Les appareils auditifs

Un appareil auditif est un petit équipement qui rend un son plus fort. Beaucoup de gens pensent qu'un appareil auditif guérit le problème d'audition d'un enfant et lui permet d'entendre des sons comme les autres. Ce n'est pas vrai. Les appareils auditifs rendent seulement les sons plus forts. Ils ne résolvent pas tous les problèmes auditifs. Pour plus d'informations sur les différentes sortes de perte d'audition, voir Chapitre 5.

Les appareils auditifs peuvent être portés sur chaque oreilles, selon la sorte de perte d'audition de l'enfant. Ils peuvent aider un enfant qui entend des sons à mieux les entendre. Si un enfant n'entend aucun son, un appareil auditif n'aidera probablement pas.


Un appareil auditif est-il bon pour un enfant?

AVANTAGES

Les appareils auditifs peuvent aider un enfant qui entend un peu à comprendre des paroles, à mieux entendre des sons et à mieux parler.

DIFFICULTÉS

Les appareils auditifs aident seulement les enfants avec certains types de perte d'audition. Ils ont besoin de batteries et ont besoin d'être entretenus. Ils sont chers et se cassent facilement. Un enfant qui utilise un appareil auditif devra aller régulièrement à une clinique pour faire des tests d'audition.

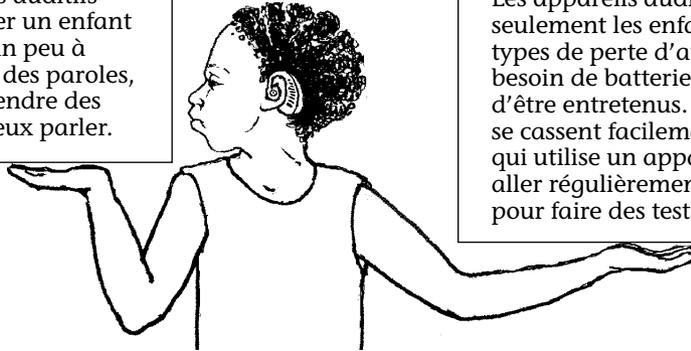

Un appareil auditif fonctionnera bien seulement s'il convient exactement à l'oreille d'un enfant. Le moule d'oreille (la partie qui se conforme à l'oreille) est fait à partir des impressions de l'oreille externe et aucune oreille ne se ressemble. Chez les petits enfants, le moule doit être vérifié au moins deux fois par an. Il doit être remplacé puisque l'oreille d'un enfant se développe et change de forme.

CE QU'UN APPAREIL AUDITIF PEUT FAIRE


Les avantages d'un appareil auditif dépendent du genre de perte d'audition de l'enfant.



- Si un enfant peut entendre quelques sons, un appareil auditif l'aidera à entendre les sons qui sont trop faibles et qu'il ne peut pas entendre tout seul.

- Si un enfant peut entendre des sons de parole faible, un appareil auditif rendra la parole plus forte, et peut l'aider à entendre ce que les autres disent. Ceci peut également aider un enfant à apprendre à parler.

- Si un enfant peut entendre quelques sons, un appareil auditif peut l'alerter pour les sons qui préviennent quand il y a un danger.

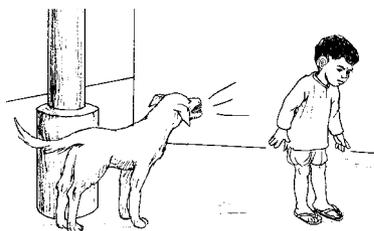

CE QU'UN APPAREIL AUDITIF NE PEUT PAS FAIRE

- Si un enfant n'entend aucun son d'un certain ton (voir Chapitre 5), un appareil auditif ne l'aidera pas à entendre ces genres de bruits.



Cet enfant ne peut pas entendre les sons d'un ton fort, quel qu'en soit leur force. Un appareil auditif ne l'aidera pas à entendre une flûte.



- Les appareils auditifs rendent tous les sons plus forts. Cela signifie qu'un appareil auditif n'aidera pas quelqu'un qui se trouve dans un endroit bruyant à entendre les gens plus clairement que d'autres sons.

Types d'appareils

Voici 2 des appareils auditifs les plus courants que les enfants utilisent :

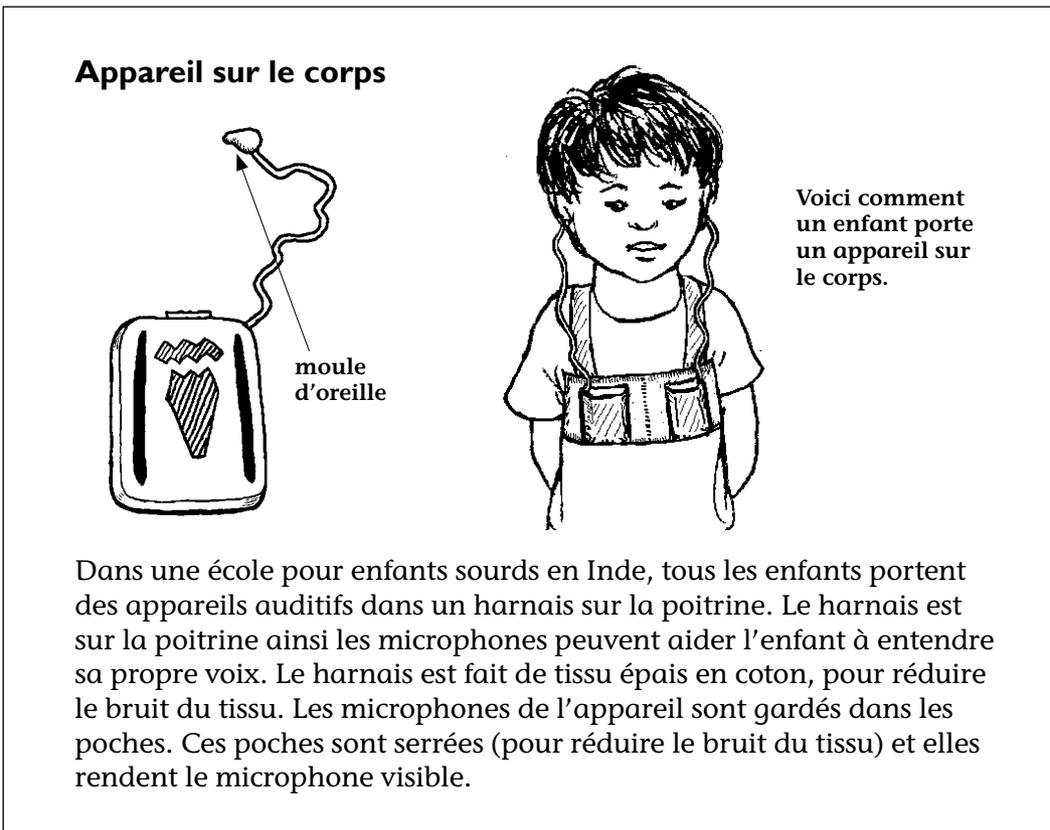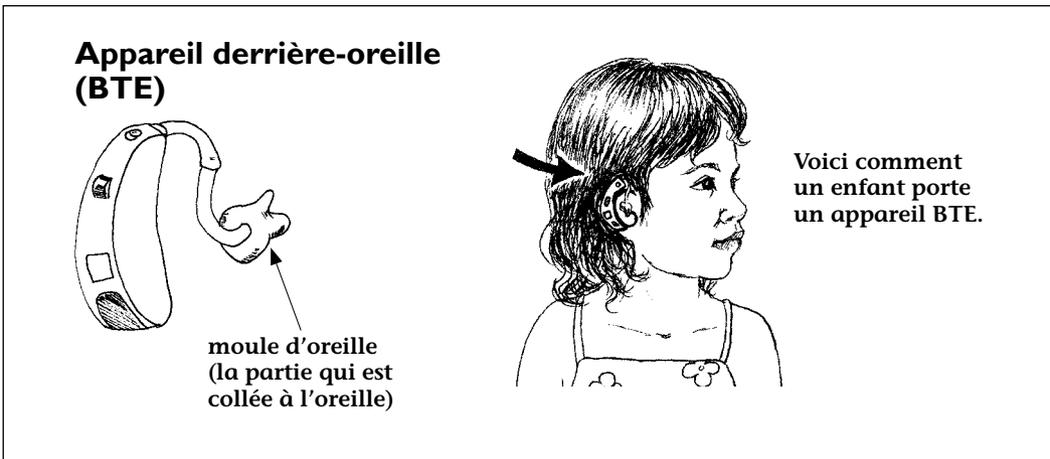

Si un enfant peut utiliser appareil auditif, Il est mieux pour l'enfant de commencer à le porter aussitôt que possible. De cette façon, il peut s'habituer aux sons et commencer à apprendre ce qu'ils signifient. Pour obtenir une plus grande aide de son appareil auditif, il doit le porter tout le temps, à l'exception de quand il se baigne ou quand il dort.

Les bébés peuvent commencer à porter des appareils auditifs 3 mois après leur naissance



Un appareil auditif est-il un bon choix pour votre famille?

Si vous hésitez du choix d'un appareil auditif pour votre enfant, vous devez penser à :

- l'endroit où votre enfant pourra faire des tests d'audition
- combien coûtera un appareil auditif

L'audition de votre enfant doit être testée par un spécialiste qui a tout l'équipement pour tester l'audition de votre enfant (voir Chapitre 5). Les informations issues du test sont utilisées pour placer l'appareil auditif afin qu'il puisse produire les sons forts appropriés pour votre enfant. Il devra être examiné chaque année. Voici quelques questions à considérer :




Pouvons-nous payer les frais du test ?

Le test auditif peut être cher. Cependant, dans certains endroits, on offre gratuitement le test ou on le fait à bas pris.

Pouvons-nous payer un appareil auditif, de nouveaux moules et de nouvelles batteries ?

Les appareils auditifs sont chers au début, mais leur achat n'est pas le seul coût. Un enfant entre les âges de 2 et 6 ans aura besoin d'un nouveau moule d'oreille environ tous les 6 mois parce que ses oreilles se développent rapidement. Le moule de l'oreille doit être bien fixée autrement l'appareil auditif ne fonctionnera pas correctement.

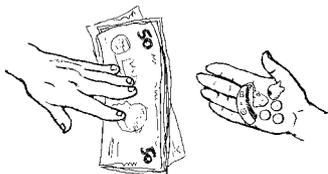

L'achat des nouveaux moule d'oreille et de nouvelles batteries peut être très coûteux.

Dans certains endroits, le gouvernement peut avoir des programmes de distribution des appareils auditifs gratuite ou de vente à moindre coût. Essayez de prendre contact avec le Ministère de l'Éducation, le Ministère de la Santé ou une école pour sourds. Mais de tels programmes ne sont pas disponibles partout.

Vous pouvez avoir besoin de nouvelles batteries chaque semaine ou tous les deux mois. Le nombre de fois que vous avez besoin de batteries dépend du nombre d'heures d'utilisation de l'appareil chaque jour par votre enfant, du type d'appareil auditif qu'il a et de la sorte de batterie qu'il utilise. Certains pays les fournissent gratuitement.

Les appareils auditifs et les batteries devraient être disponibles pour tous les enfants qui en ont besoin, pas juste pour les familles qui ont les moyens de les avoir!



Pouvons-nous vérifier l'appareil auditif chaque jour et le maintenir ?



Les appareils auditifs doivent être vérifiés chaque matin pour s'assurer que les batteries et l'appareil fonctionnent bien. Les moules aussi doivent être lavés et séchés régulièrement afin que la saleté n'empêche pas le bruit d'entrer dans l'oreille.

Et les appareils auditifs doivent être manipulés soigneusement. Si l'appareil est humide ou s'il tombe à terre, il peut tomber en panne et aura besoin d'être réparé.

Si vous décidez d'obtenir un appareil auditif


Si vous décidez d'obtenir un appareil auditif pour votre enfant, cherchez d'abord à avoir des informations sur l'appareil ainsi vous pouvez apprendre :

- comment aider votre enfant à s'habituer à porter un appareil auditif
- comment entretenir l'appareil auditif
- comment vérifier l'appareil chaque jour pour être sûr qu'il fonctionne
- ce qui est à faire quand l'appareil ne fonctionne pas bien

► Des manières d'aider votre enfant à s'habituer à porter un appareil auditif

Chaque enfant réagit différemment à des appareils auditifs. Certains enfants les aiment tout de suite, d'autres ne les trouvent pas confortables. Au début, faites porter l'appareil auditif pendant 15 à 30 minutes seulement. Augmentez graduellement le temps que votre enfant porte l'appareil. Cela peut durer avant qu'il ne s'habitue à l'appareil.

Si votre enfant porte l'appareil auditif tandis qu'il s'amuse, il est moins probable qu'il le dérange

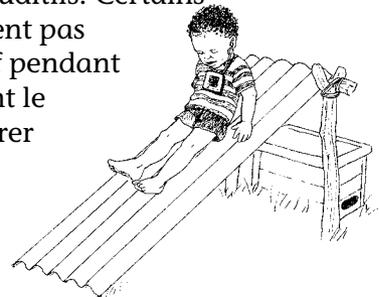

Commencez à utiliser l'appareil auditif dans un environnement silencieux pour aider votre enfant à prendre conscience des nouveaux sons qu'il peut entendre. Aidez-le à remarquer les sons en l'emmenant plus près du bruit ou en pointant le bruit vers lui.



► **Comment savoir que votre enfant entend de nouveaux sons**

Ne vous attendez pas à ce que votre enfant réagisse aux sons immédiatement. Votre enfant devra apprendre à se rendre compte des sons après que son appareil auditif est mis en marche. La réaction des enfants au son dépend de leur âge et de la quantité des sons qu'ils peuvent entendre.

Vous pouvez être obligé à observer attentivement pour voir les réactions de votre enfant. Il peut :

- cligner ses yeux ou arrêter ce qu'il fait.
- ayez plaisir à jouer avec les jouets qui font du bruit.
- criez quand il entend un son.
- regardez ou retournez vous quand il entend un bruit.

Cela peut durer des semaines ou des mois avant de voir votre enfant réagir à un son.

Tuan-Jai ne semble pas entendre quelque chose. Elle ne regarde pas la cuillère quand je la tape sur la cuvette.



► **Aidez votre enfant à comprendre les nouveaux sons qu'il entend**



Même si un appareil auditif aide votre enfant à entendre des sons, il ne peut pas comprendre les sons qu'il entend tout de suite. Votre enfant aura besoin de s'entraîner à écouter des sons avec l'appareil auditif. Voir Chapitre 6 pour les activités qui aide votre enfant à écouter.

Au début, il peut trouver gênant d'entendre des sons, parce qu'il est habitué à vivre dans un monde plus silencieux.

Comment entretenir les appareils auditifs

Avec un entretien régulier, les appareils auditifs dureront plus longtemps et émettront un bon son.

Quelques conseils pour un meilleur fonctionnement d'un appareil

- Gardez l'appareil auditif loin des équipements électriques comme les réfrigérateurs et les téléviseurs.
- Ne l'exposez pas à une température trop élevée ni trop basse.
- Gardez-le sec - l'eau ou la sueur l'endommagera. Pendant le jour, enlevez-le et nettoyez la sueur ou l'humidité. Enlevez l'appareil avant de se baigner, nager ou quand vous êtes sous la pluie. La nuit, mettez le dans un récipient avec du gel de silice (un matériau qui absorbe l'humidité). N'utilisez pas les parfums ou aucune sorte de jet sur l'appareil auditif.

Maintenant frottons-le avec le tissu.



Le nettoyage

- Utilisez un tissu sec mou pour le nettoyer. Ne jamais utilisez un liquide de nettoyage.

Moule d'oreille

- Vérifiez régulièrement la cire dans le moule d'oreille.
- Nettoyez le moule d'oreille avec de l'eau chaude.

Batterie


- Pour prolonger la vie de la batterie, éteignez l'appareil s'il n'est pas en usage.
- Gardez la batterie propre et enlevez-la quand l'appareil auditif n'est pas en utilisation pour une longue durée — par exemple, quand un enfant dort la nuit.
- Changez la batterie souvent. Pour voir s'il est temps de la changer, mettez le son à un réglage fort. S'il y a un sifflement, la batterie est bonne. Si non, il faut chercher une nouvelle batterie. Si la batterie perd sa puissance plus rapidement que d'habitude, il peut avoir un problème avec l'appareil.
- Mettez les batteries dans un endroit frais et sec. Apportez une batterie qui a été gardée dans un réfrigérateur à la température ambiante avant de l'utiliser.

Essayez d'avoir un appareil auditif testé de manière périodique dans une clinique ou dans un magasin de vente d'appareils auditifs.

Les appareils auditifs peuvent avoir besoin de réparation. Parfois la réparation d'un appareil auditif se fait seulement dans les grandes villes. Mais les organisations de sourds ont commencé à former des sourds pour prendre les impressions d'oreille pour faire des moules et pour réparer les appareils auditifs.

Problèmes et solutions communs aux appareils auditifs

Utilisez cette liste pour vous aider à vérifier et à réparer les pannes courantes des appareils auditifs. Si l'appareil auditif ne marche toujours pas, il a besoin d'être réparé.

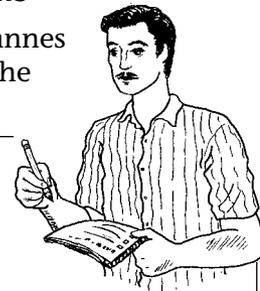

Si l'appareil auditif est "mort"

- est-il - allumé ? Mettez-le en marche.
- La batterie est-elle morte ou faible ? Remplacez la batterie
- La batterie est-elle insérée..... Contrôlez les signes + et - sur les batteries correctement ? pour voir s'ils correspondent à ceux de l'appareil auditif.
- Le fil est-il coupé ? Remplacez le fil.
- Le moule d'oreille est-il bloqué ? Nettoyez le blocage dans le moule d'oreille.
- L'eau est-elle entrée dans l'appareil ? ... Enlevez la batterie, essuyez-la, et metez-la dans un conteneur avec du gel de silice.

Si le son n'est pas assez fort

- La batterie est-elle faible ? Remplacez la batterie.
- Le réglage du son est-il trop bas ? Tournez le plus fort.
- Les moules d'oreille sont-ils lâches ? Insérez-les soigneusement.
- Le moule d'oreille est-il bloqué ? Nettoyez le blocage dans le moule d'oreille.
- Y a-t-il beaucoup de cire dans l'oreille ? .. Nettoyez la cire d'oreille.
- L'audition de l'enfant a-t-elle changé ? Vérifiez l'audition.

Si des sons gênant qui viennent et disparaissent

- La batterie est-elle faible ? Remplacez la batterie.
- Le fil est-il coupé ? Remplacez le fil.

S'il y a "un bruit friture"

- La batterie est-elle faible ? Remplacez la batterie.

Si le son n'est pas clair, ou s'il est déformé

- La batterie est-elle faible ? Remplacez la batterie.
- Le fil est-il coupé ? ? Remplacez le fil.
- Le microphone est-il couvert par des vêtements ? Exposez le microphone.
- Le microphone est-il couvert de poussière ? Nettoyez le avec du tissu mou ou avec une brosse.